


官方網站



屏北區LINE@

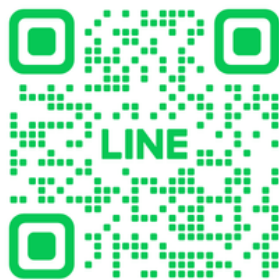

屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心

Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



移位型輪椅

衛教單

屏東縣政府廣告

星期一至星期五

08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六

08:00~12:00

適用對象：

- 設計目的：移位時，避免扶手或踏板阻礙，讓轉移更順利，減輕照顧者負擔，降低臀部抬舉高度，節省力氣
- 適用對象：需要頻繁移位、且身體狀態穩定的使用者

注意事項

- 可折背樣式：適用後行李箱較小的汽車
- 扣好骨盆帶：外出時，確保骨盆帶緊扣骨盆兩側，避免滑落，提升安全性



骨盆兩側


如何正確使用？

1. 主要功能：

- 可拆扶手：按下扶手側邊按鈕，向上拉起，方便側邊轉移



- 可拆踏板：拉住結構，輕鬆移除，腳部空間更寬敞

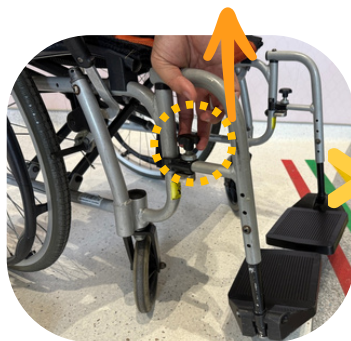

結構鈕往上拉



往外移除踏板

2. 使用提醒

煞車上鎖

TIPS：
起身或坐下前，務必確認輪椅已上鎖，保障安全



TIPS：踏板高度調整

大腿輕觸坐墊，膝蓋略低於臀部，支撐更舒適



TIPS：

- 孔洞越高 踏板越短，大腿遠離坐面
- 孔洞越低 踏板越長，大腿靠近坐面



如大腿懸空、腳不穩，請調低踏板，讓大腿輕觸坐墊、腳有支撐